

Инструкция по установке ПО «Программа для АЭС-ИСП спектрометров Афина»

Оглавление

1.	Установка ПО	3
1.1.	Системные требования	3
1.2.	Загрузка программного обеспечения.....	3
1.3.	Установка программного обеспечения	3
2.	Запуск ПО и его активация.....	4

1. Установка ПО

1.1. Системные требования

Перед установкой ПО «Программа для АЭС-ИСП спектрометров Афина» (далее – Афина, ПО, система, программа), пожалуйста, убедитесь, что ваше устройство соответствует системным требованиям, указанным ниже.

Тип	ОС	CPU	RAM	.Net
Минимальные	Windows 10 Home/Pro	Dual- core 1.4GHz 64-bit	4 GB	framework 4.7 и выше
Рекомендованные	Windows 10 Home/Pro	Dual- core 2.4GHz 64-bit	8 GB	framework 4.7 и выше

1.2. Загрузка программного обеспечения

Загрузите экземпляр ПО с сайта Правообладателя ПО по ссылке, которая предоставляется Правообладателем ПО.

1.3. Установка программного обеспечения

Перед установкой убедитесь, что Вы вошли в систему с правами Администратора. Настоятельно рекомендуется завершить все остальные приложения во время проведения установки или обновления.

1. Распакуйте скачанный архив и запустите исполняемый файл из этого архива.
2. В зависимости от того, выполняется ли новая установка или обновление старой версии – выберите соответствующий пункт в появившемся окне. Обратите внимание: обновление возможно только при наличии резервной копии старой версии программы. Для выполнения резервного копирования обратитесь к соответствующему разделу Руководства по программному обеспечению «Программа для АЭС-ИСП спектрометров Афина».
3. Введите пароль для установки. Пароль можно получить у Правообладателя ПО.

4. Если выполняется новая установка – выберите папку, куда будет установлено программное обеспечение. Мы рекомендуем оставить папку по умолчанию.
5. Дождитесь окончания установки.


2. Запуск ПО и его активация

Для запуска программного обеспечения необходимо дважды нажать на иконку программы, появившуюся на рабочем столе персонального компьютера, либо в меню Пуск. Если было выполнено обновление Афины с использованием резервной копии – программа готова к использованию.

Если выполнена установка нового экземпляра Афины, то для её активации и привязки к Вашему АЭС-ИСП спектрометру необходимо выполнить следующее.

В окне Афины в строке меню нажмите «Справка» - «Регистрация прибора» и в открывшемся окне (рис.1) введите серийный номер Вашего АЭС-ИСП спектрометра и лицензионный номер, полученный Вами от Правообладателя ПО.

Рисунок 1 – Окно регистрации ПО «Программа для АЭС-ИСП спектрометров Афина»

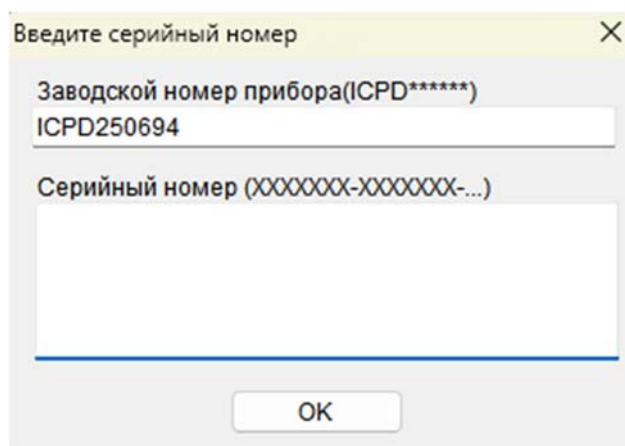

Введите серийный номер

Заводской номер прибора(ICPD*****)
ICPD250694


Серийный номер (XXXXXXXX-XXXXXX-...)

ОК

После нажатия «ОК» информация о регистрации будет сохранена, и ПО «Программа для АЭС-ИСП спектрометров Афина» станет полностью функциональным.

Откроется стартовое окно ПО «Программа для АЭС-ИСП спектрометров Афина».

Рисунок 2 – Стартовое окно ПО «Программа для АЭС-ИСП спектрометров Афина»

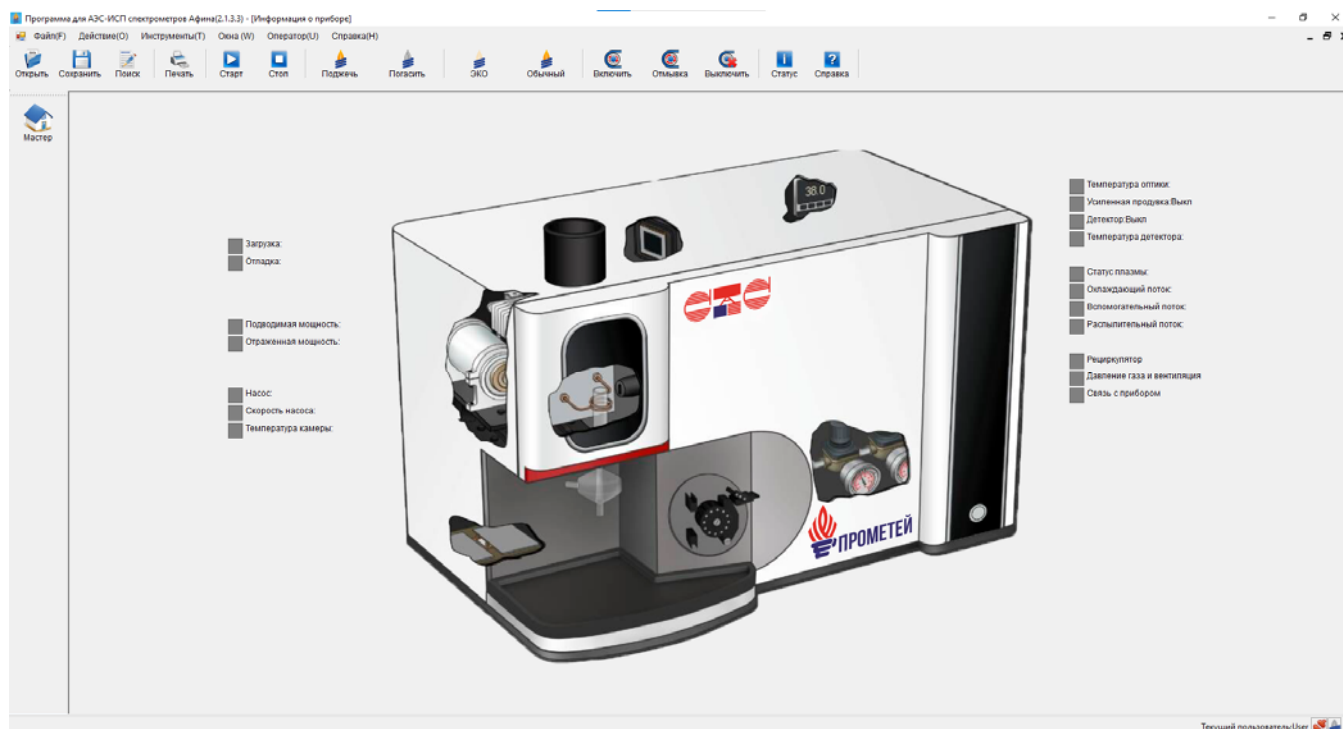

Информация по работе с ПО «Программа для АЭС-ИСП спектрометров Афина» содержится в руководстве по работе с программным обеспечением «Программа для АЭС-ИСП спектрометров Афина».